



medicare[®]
a saúde em 1º lugar

PetSpacer[®]

Mais qualidade de vida
para cães e gatos com
doenças respiratórias

Respirar
melhor,
viver melhor



PetSpacer[®]

Segura e
efetiva

CÂMARA EXPANSORA
PARA TRATAMENTO DE
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
EM CÃES E GATOS



Para gatos
e cães



Mantém a medicação
por mais tempo



Câmara
portátil



Segura com
eficácia efetiva

petspacer.medcare.pt

PetSpacer[®]

Máscaras
específicas
para cães
e gatos

COMPONENTES FUNCIONAIS DO PRODUTO



CÂMARA EXPANSORA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

A asma felina é um problema respiratório comum em gatos, que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Os sintomas incluem tosse, falta de ar e pieira. Para melhorar estes sintomas, a utilização da câmara expansora da PetSpacer pode melhorar de forma substancial a saúde da sua mascote.



VANTAGENS DE UTILIZAR A PETS PACER

100% estanque ao ar

Eficiência na administração do medicamento contido na câmara.

Redução do stress: evita que o animal reaja adversamente ao dispositivo e à medicação.

Otimização da dose: A PetSpacer ajuda a contar as respirações.

Fácil de limpar e desmontar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1



Agitar o inalador e introduzir na parte traseira da câmara

2



Pressione o inalador para administrar o medicamento

3



Coloque a máscara com cuidado de modo a que cubra o nariz e a boca, mas nunca os olhos.


4



Utilize o indicador de fluxo para contar 7-10 respirações.

CÂMARA EXPANSORA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

A bronquite crónica e outros problemas respiratórios são comuns em cães e podem ser motivo de particular preocupação. Os sintomas incluem tosse persistente, falta de ar e pieira (respiração sibilante). Quando é necessário administrar medicação inalatória, o uso da câmara expansora PetSpacer traz benefícios na saúde respiratória do animal.

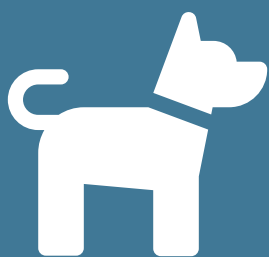

VANTAGENS DE UTILIZAR A PETS PACER

100% estanque ao ar

Eficiência na administração do medicamento contido na câmara.

Redução do stress: evita que o animal reaja adversamente ao dispositivo e à medicação.

Otimização da dose: A PetSpacer ajuda a contar as respirações.

Fácil de limpar e desmontar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1



Agitar o inalador e introduzir na parte traseira da câmara

2



Pressione o inalador para administrar o medicamento



Coloque a máscara com cuidado de modo a que cubra o nariz e a boca, mas nunca os olhos.

4



Utilize o indicador de fluxo para contar 7-10 respirações.

PetSpacer[®]

Já disponível
nas farmácias

CUIDAR DA SUA RESPIRAÇÃO É CUIDAR DO SEU FUTURO

Forneça sempre o CNP na prescrição da câmara expansora

PetSpacer para gatos
CNP 7640557

PetSpacer para cães
CNP 7640565



medcare[®]
a saúde em 1º lugar

petspacer.medcare.pt